



EIN NEUER WEG,  
DAMIT SICH IHRE  
PATIENTEN SICHER  
FÜHLEN

Der Navina Fecal Incontinence Insert ist ein innovativer Einsatz,  
um ungewollten Stuhlverlust zu vermeiden.

**Navina**™


# WECHSELN SIE VON SORGEN ZU NEUER HOFFNUNG

Was ist eigentlich Lebensqualität? Fragen Sie jemanden mit Darmproblemen, der aus Angst vor ungewolltem Stuhlverlust und peinlichen Unfällen das Haus nicht verlassen kann. Wenn sich alles darum dreht, in der Nähe einer Toilette zu bleiben, ist das Leben sehr eingeschränkt. In der Tat kann es zu einer verzögerten Behandlung, selbst auferlegter Isolation und Depression führen.

Wellspect präsentiert eine smarte Lösung, um die Symptome von Stuhlinkontinenz zu lindern. Der neue innovative Navina Fecal Incontinence Insert ist weich und flexibel und besteht aus Silikon und Flüssigkeit. Durch die Wissenschaft der Flüssigkeitsdynamik erhält der Einsatz eine anatomische Passform und verhindert so ungewollten Stuhlverlust.

„Ich sage das nicht sehr oft, aber ich bin sehr zufrieden mit diesem Produkt. Ich kann wirklich sehen, dass es einen echten Unterschied im Leben meiner Patienten macht.“


Bev Collins, Leitende Krankenschwester,  
Wellspect HealthCare, UK

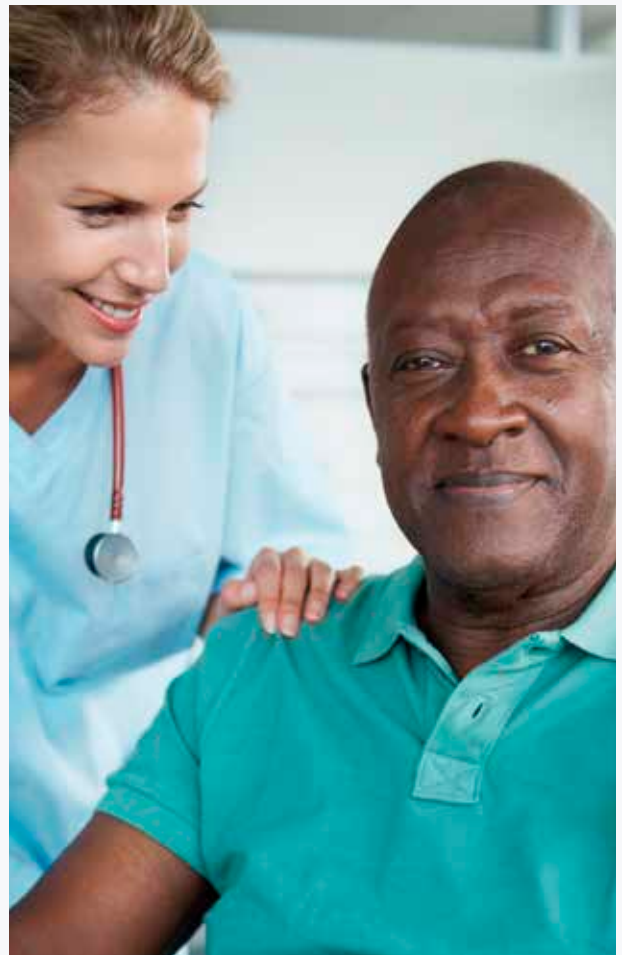


## SCHRITT-FÜR-SCHRITT-ANLEITUNG



**1.** Halten Sie den gleitmittelbeschichteten Einsatz an der breiten Halterung und richten Sie die Spitze des Einsatzes auf den Anus aus.

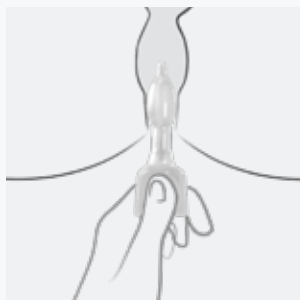

**2.** Führen Sie den Einsatz vorsichtig ein, bis die breite Halterung am Anus anliegt. Ziehen Sie die Einführhilfe heraus und entsorgen Sie sie im Hausmüll.

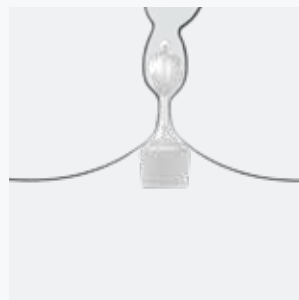

**3.** Der mit Flüssigkeit gefüllte Einsatz passt sich den Konturen des Körpers an und hilft so, ungewollten Stuhlverlust zu verhindern.



**4.** Um den Einsatz zu entfernen, fassen Sie die Halterung und ziehen ihn vorsichtig heraus. Entsorgen Sie ihn im Hausmüll.



## EIN INNOVATIVES DESIGN FÜR MEHR VERTRAUEN

Der flexible, mit Flüssigkeit gefüllte Einsatz ist so konstruiert, dass er sich durch die Flüssigkeit im Innern anpasst und bewegt. Dies ermöglicht ein einfaches Einführen und Entfernen und bietet einen hohen Tragekomfort. Der Navina Fecal Incontinence Insert ist so konzipiert, dass er einfach in der Handhabung ist, einen ungewollten Stuhlverlust verhindert und ein unabhängiges und aktives Leben ermöglicht.

- Entwickelt zum Schutz vor ungewolltem Stuhlverlust
- Designed für mehr Tragekomfort
- Vorgesehen für mehr Hygiene

### 24 STUNDEN ANWENDUNG

Er kann bis zu 24 Stunden lang ununterbrochen getragen werden.

### HYGIENISCH UND ANWENDERFREUNDLICH

Die Einführhilfe gibt dem Einsatz während des Einführens Stabilität und hilft, die Finger sauber zu halten.

### FLEXIBILITÄT UND KOMFORT

Der aus weichem Silikon gefertigte und mit geschmeidiger Flüssigkeit gefüllte Einsatz ist sorgfältig verarbeitet, um ein bequemes Einführen zu gewährleisten und sich den Bewegungen anzupassen.

### SICHERE POSITIONIERUNG

Die breite Außenhalterung lässt sich bequem zusammendrücken und ist so konstruiert, dass der Einsatz sicher in Position bleibt.

### DOPPELTE SICHERHEIT

Zum einen liegt die Halterung am anorektalen Übergang an und verhindert so den ungewollten Stuhlverlust. Zum anderen passt sich der Schaft an und füllt den Analkanal aus, wodurch der Druck der Schließmuskeln den Kanal abdichtet und ein Vorbeilaufen von Stuhl verhindert.

**KONTAKTIEREN SIE UNS NOCH HEUTE.  
IHRE PATIENTEN WERDEN SCHON MORGEN  
DAVON PROFITIEREN.**

Bei Wellspect entwickeln wir innovative Kontinenzlösungen, die das Leben der Menschen verändern. Wir möchten unsere Anwender dazu inspirieren, Selbstvertrauen und Unabhängigkeit sowie Gesundheit und Wohlbefinden zu entwickeln. Mit unseren Marken LoFric<sup>®</sup> und Navina<sup>™</sup> sind wir seit über 30 Jahren branchenführend. Wir entwickeln zuverlässige und benutzerfreundliche Produkte für das Blasen- und Darmmanagement mit möglichst geringer Umweltbelastung. Wir sind leidenschaftlich bemüht, klimaneutral zu werden und eng mit Anwendern und Angehörigen der Gesundheitsberufe zusammenzuarbeiten, die uns ständig dazu inspirieren, unsere Produkte und Dienstleistungen jetzt und für die Zukunft auf nachhaltige Weise zu verbessern.

### **Wellspect. Ein echter Unterschied.**

Weitere Informationen zu unseren Produkten und unserer Initiative Advancing Continence Care Together (ACCT) finden Sie unter [Wellspect.de](http://Wellspect.de).

Folgen Sie uns auch auf Facebook und Instagram.

#### **Deutschland**

Tel.: +49 (0) 800 2727872  
[info.de@wellspect.com](mailto:info.de@wellspect.com)

#### **Schweiz**

Tel.: +41 (0) 800 620 240  
[info-ch@wellspect.com](mailto:info-ch@wellspect.com)

[wellspect.de](http://wellspect.de)



[wellspect.ch](http://wellspect.ch)



Minnesota Medical Technologies  
2446 Henry Road Northwest  
Stewartville, MN 55976 USA  
507-533-0366  
[www.mnmedtech.us](http://www.mnmedtech.us)



Importer: Wellspect HealthCare  
(A division of Dentsply IH AB)  
Aminogatan 1  
PO Box 14  
SE-431 21 Mölndal  
Sweden  
[www.wellspect.com](http://www.wellspect.com)



MPS Medical Product Service GmbH  
Borngasse 20  
Braunfels 35619  
Germany